

Gamme endodontique COLTENE

LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE

LIMES HyFlex™ CM

SOLUTIONS CanalPro™

MATÉRIEL ENDO

WYŁĘBIET ENDO

CanalPro
AL

CanalPro
CL

Pièce à main
+ tête de
contre-angle
avec raccord
pour localisateur
d'apex CanalPro™

Pièce à main
+ tête de
contre-angle
sans raccord
pour localisateur
d'apex CanalPro™



ou possibilité
de raccorder
votre propre
localisateur
d'apex



 **COLTENE**

CanalPro™

LIMES HyFlex™ CM

SOLUTIONS CanalPro™

MATÉRIEL ENDO

MATÉRIEL ENDO

PIÈCE À MAIN SANS FIL CanalPro™

- > Petite **tête de contre-angle autoclavable** à 135°C,
- > Vitesse de **rotation** (t/min) : **140 ~ 550**,
- > Possibilité de mémoriser jusqu'à **5 programmes** (rotation/couple),
- > Temps de **charge rapide** : 90 min de charge pour 80 min d'autonomie,
- > Valeur de **couple** (N·cm) : **0,3 ~ 3,0**,
- > Convient à la **majorité des limes NiTi**,
- > **Ergonomique** pour un **accès plus facile** aux zones difficiles à atteindre.

DISPONIBLE
À L'ESSAI



DESCRIPTION

RÉF.

CanalPro™ CL Set complet SANS RACCORD pour localisateur d'apex :
Pièce à main, Tête contre-angle 16:1, Chargeur

Réf. 6001 1035

CanalPro™ CL Set complet AVEC RACCORD pour localisateur d'apex :
Pièce à main, Tête contre-angle 16:1 AL, Chargeur

Réf. 6001 4050

CanalPro™ CL Tête contre-angle 16:1 AL AVEC RACCORD pour localisateur d'apex

Réf. 6001 3747



LOCALISATEUR D'APEX CanalPro™

- > **Interface conviviale et intelligente** : le localisateur d'apex CanalPro™ est doté d'une interface utilisateur 3D avec affichage TFT (Thin Film Transistor) graphique couleur 3,5" de haute résolution. Cette interface permet de visualiser le déplacement de la lime à l'intérieur du canal des premières aux dernières mesures pour un suivi ininterrompu par le dentiste.
- > **Mesures précises** : les 2 fréquences de mesure sont alternées et non pas mixées.

DESCRIPTION


RÉF.

Localisateur d'apex CanalPro™ Set complet
1 localisateur d'apex CanalPro™, 1 chargeur,
1 câble de mesure, 2 clips labiaux,
2 griffes porte instrument, 1 pointe de touche


Réf. 6001 4334

Clips labiaux
Localisateur d'apex CanalPro™ (5 unités)


Réf. 6001 4338

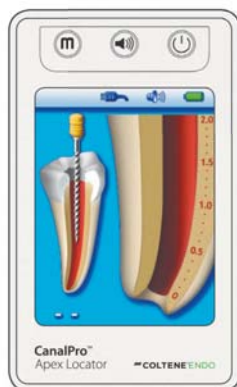

1 Suivi de la progression de la lime

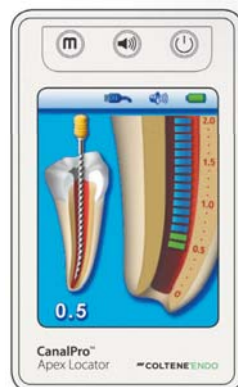

2 Visualisation et progression affinée dans le tiers apical grâce à 11 segments.

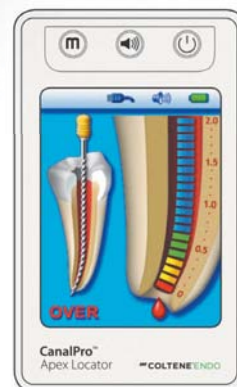

3 Sur-instrumentation

CanalPro™

MATÉRIEL ENDO

LIMES HyFlex™ CM

ΓΙΜΕΣ ΗΥΕΛΕΞ™ CM

SOLUTIONS CanalPro

LIMES HyFlex™ CM NiTi

> Jusqu'à 300% de résistance en plus à la fracture




Reprend sa forme après un traitement par la chaleur = **RÉUTILISABLE**

Les limes HyFlex™ CM NiTi répondent aux contraintes excessives dans la paroi canalaire par un allongement de leurs spirales ce qui empêche un engagement trop important et augmente ainsi la résistance à la rupture. Le traitement par la chaleur des limes HyFlex™ CM NiTi permet à l'alliage une régénération et une reprise de la forme initiale des spirales. Le processus de régénération de l'alliage de nos limes HyFlex™ CM NiTi augmente considérablement leur résistance à la fatigue cyclique. Un contrôle visuel de l'état d'usure de l'alliage de nos limes NiTi apporte une double sécurité pour les utilisateurs qui peuvent ainsi constater si l'instrument est réutilisable ou s'il doit être jeté.

3 façons d'utiliser les limes HyFlex™ CM NiTi

1 Notre technique
Les limes HyFlex™ CM NiTi peuvent être utilisées avec la technique appelée "single length" que nous recommandons.

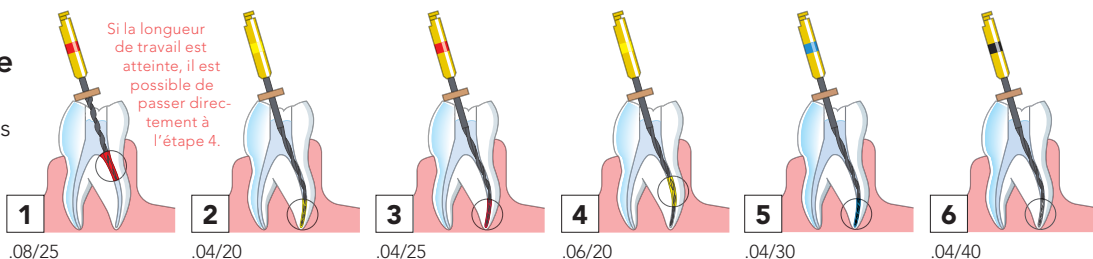

2 Technique crown-down
(step by step)

En fonction de la situation clinique, le nombre d'instrument peut être réduit à 3 pour la technique crown-down.

- 1 .08/25
- 2 .06/25 avec lime X-TRA
- 3 .04/25

3 Votre technique
existe en 4% et 6%

(voir tableau).
Exemple classique d'utilisation en France :

- 1 .04/20
- 2 .04/25
- 3 .06/20 avec lime X-TRA
- 4 .06/25 avec lime X-TRA

		DIMENSIONS															X-TRA spirales pour technique crown-down	
		.08/25	.04/15	.04/20	.04/25	.04/30	.04/35	.04/40	.04/45	.04/50	.04/60	.06/20	.06/25	.06/30	.06/35	.06/40	.06/20	.06/25
LONGUEUR	19 mm	6001 1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 mm	-	6001 1049	6001 1050	6001 1052	6001 1053	6001 1054	6001 1055	6001 1056	6001 1057	6001 1058	6001 1059	6001 1060	6001 1061	6001 1062	6001 1063	6001 8699	6001 8702
	25 mm	-	6001 1065	6001 1066	6001 1067	6001 1068	6001 1069	6001 1070	6001 1071	6001 1072	6001 1073	6001 1074	6001 1075	6001 1076	6001 1077	6001 1078	6001 8700	6001 8703
	31 mm	-	6001 8284	6001 8285	6001 8286	6001 8287	-	6001 8288	-	6001 8289	6001 8290	6001 8291	-	6001 8292	-	6001 8293	6001 8701	6001 8704

CanalPro™

MATÉRIEL ENDO

LIMES HyFlex™ CM

SOLUTIONS CanalPro™

СOЛУЦИОНС CanalPro™

SOLUTIONS D'IRRIGATION ENDODONTIQUE CanalPro™

Lorsqu'il est question d'irrigation, les solutions endodontiques CanalPro™ sont idéales pour obtenir un traitement efficace. Nous avons perfectionné nos solutions de préparation endodontique pour optimiser le temps consacré à l'irrigation et vous fournir ainsi la meilleure méthode de nettoyage des canaux avec des résultats optimaux.

CanalPro™ NaOCl

- > Pour l'irrigation/le débridement des canaux radiculaires pendant et après l'instrumentation,
- > Disponible en concentration 3% et 6%.



DESCRIPTION	RÉF.
CanalPro™ NaOCl à 3% Quantité 480 ml	Réf. 6001 1160
CanalPro™ NaOCl à 6% Quantité 480 ml	Réf. 6001 1161

CanalPro™ EDTA

- > Solution d'EDTA à 17% (pH 8.5),
- > Élimine la smear layer,
- > Ouvre les tubulis dentinaires afin d'améliorer la diffusion des solutions de désinfectin et l'adhésion des matériaux d'obturation.

DESCRIPTION	RÉF.
CanalPro™ EDTA Quantité 480 ml	Réf. 6001 1157
CanalPro™ EDTA Quantité 120 ml	Réf. 6001 1158



CanalPro™ CHX

- > Solution de digluconate de chlorhexidine à 2%,
- > Recommandée comme irrigant additionnel et en cas de reprise de traitement canalaire,
- > Très efficace contre E. Faecalis et fungi.

DESCRIPTION	RÉF.
CanalPro™ CHX 2% Quantité 480 ml	Réf. 6001 3994
CanalPro™ CHX 2% Quantité 120 ml	Réf. 6001 4327



Dispositif médical classe II a / CE0483 mdc. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent S.a.r.l.
75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 02 / France
Tél +33 2 43 39 30 30
Fax +33 2 43 39 30 40
info.fr@coltene.com

www.coltene.com

COLTENE