

KaVo Primus® 1058

Essayé, testé et définitivement approuvé !



KaVo. Dental Excellence.

Le best seller KaVo Primus® 1058. Fiable pour des décennies.

Fiabilité éprouvée dans la pratique, plébiscitée depuis des années.

L'unité de soins KaVo Primus 1058 compte parmi les nombreux succès de KaVo, le fabricant allemand réputé pour sa qualité. Mais quel est donc le secret de cette si grande popularité ? Leur très grande fiabilité et solidité. Tous les composants et fonctions sont parfaitement adaptés les uns aux autres, et nous renonçons sciemment à tout ce qui est superflu. Par conséquent, KaVo Primus 1058 est particulièrement rentable, aujourd'hui mais aussi sur le long terme. Un détail apprécié par des milliers de dentistes dans le monde.



Version cordons pendants KaVo Primus 1058 TM.
Fauteuil réglable en hauteur de 395 mm à 780 mm.

Vous savez ce dont vous avez besoin. Le bon concept de traitement.

Le bon équipement pour chacun – nos trois variantes éprouvées.

Quiconque opte pour KaVo Primus 1058 connaît parfaitement ses priorités. Une unité de soins doit fonctionner sans faille, être fiable en application et assurer des résultats de soins convaincants. L'élément praticien ingénieux, l'élément assistante facile à utiliser, les fonctions d'hygiène automatisées, l'ergonomie pour le praticien, l'assistante et les patients ainsi que les nombreuses propriétés du KaVo Primus 1058 en sont les garants. En outre, ses trois variantes lui permettent de s'adapter de manière optimale à tout système de soins et à la configuration de votre cabinet.

- **La version cordons pendants.**

L'élément praticien compact vous offre encore plus de liberté de mouvement pour un travail parfait et ergonomique quelle que soit la position de soin.

- **La version fouets.**

Les instruments placés en balancier sont à portée de main immédiate tandis que le guidage hygiénique des tuyaux ainsi que le boîtier clos facilitent l'hygiène.

- **La version Cart à roulettes.**

Bénéficiez également sur la version Cart sur roulettes du guidage intuitif de l'utilisateur, profitez en outre de la mobilité de votre élément praticien que vous pourrez écarter au besoin.



Version fouets KaVo Primus 1058 S.



Version Cart à roulettes KaVo Primus 1058 C.



Les dentistes sont dans leur élément. Un travail détendu au quotidien.

Mouvements optimisés et processus efficaces.

Que vous procédiez aux soins assis ou debout : l'élément praticien de votre unité de soins KaVo Primus 1058 vous assiste par son ergonomie. Vous n'avez pas à tendre le bras ou à vous contorsionner, vous pouvez adopter à tout moment une posture naturelle et suivre vos mouvements habituels.

Tous les instruments dont vous avez besoin.

Nous équipons votre élément praticien exactement selon vos exigences et en fonction des besoins thérapeutiques individuels. Vous avez la possibilité de configurer selon votre choix le carquois de 5 logements d'instruments*. Le module d'extension permet quant à lui de raccorder en sus une caméra intraorale. Et si, plus tard, vous souhaitez des modifications, nous pourrions bien entendu les réaliser pour garantir votre flexibilité dans le futur également.

* Votre distributeur agréé KaVo se fera un plaisir de vous conseiller.



Double confort de soins avec KaVo Memospeed. Sauvegarde de la vitesse de rotation selon l'application sur trois niveaux pour deux praticiens.



Tous les logements sont déjà occupés ? Grâce au module d'extension, vous créez un espace supplémentaire directement sur votre élément praticien, par ex. pour la caméra intraorale.

Éprouvé dans le cadre de millions de traitements. Confort de soins maximal pour tous les patients.

Position plus confortable, patients plus calmes.

Avec KaVo Primus 1058, vos patients découvrent jour après jour à quel point une visite chez le dentiste peut se faire en toute détente, une détente assurée par l'assise ergonomique du fauteuil à support lombaire intégré. Grâce à l'élévation intégrée de l'assise, le fauteuil peut également être adapté pour le traitement des enfants et des patients présentant une pathologie dorsale, par ex. une cyphose. La position adéquate s'avère bénéfique pour le praticien également car plus l'installation du patient est confortable, moins il bougera. Vous, en tant que praticien, et votre assistante pourrez mieux vous concentrer sur votre travail, ce qui constitue un réel bénéfice en terme de sécurité et d'efficacité.



Plus de confort grâce à la sellerie moelleuse et son design ergonomique et support lombaire intégré.

Ergonomie compacte sans compromis.

Le COMPACTchair peu encombrant de la gamme KaVo Primus 1058 vous offre, ainsi qu'à vos patients, un véritable « plus » en termes de confort. Le fauteuil bascule de la position assise à 80° à la position allongée souhaitée tout en douceur, automatiquement et en silence. Vous pouvez conseiller vos patients lorsqu'ils sont assis et les traiter une fois allongés. Même vos patients âgés ou à mobilité réduite pourront monter et descendre facilement du COMPACTchair.



Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, l'assise permet d'installer confortablement tous vos patients quelle que soit la situation de traitement.

Fauteuil COMPACTchair : Réglable en hauteur de 390 mm à 740 mm.




Éléments praticien et fauteuil – Les atouts et avantages en aperçu :

- Posture de travail toujours ergonomique et détendue
- Efficacité de travail améliorée car vous avez tout à portée de main
- Coussin moelleux confortable avec assise ergonomique et support lombaire intégré
- Traitement plus rapide car les patients sont détendus

Facilité de travail. Commande au pied confortable.

Pas de fatigue grâce au mouvement droite-gauche

- Pas d'élongation des tendons et des muscles
- Pas de tassement de la musculature

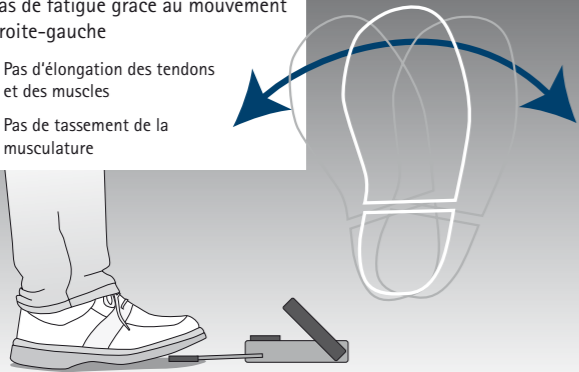

La commande au pied permet un positionnement ergonomique et naturel des jambes.


Libérez vos mains pour ce qui est important.

Moins vous touchez les équipements, plus votre travail respectera l'hygiène. Pour parvenir à ce résultat, utilisez la pédale multifonctions à l'ergonomie de pointe. Lors du traitement, elle constitue une véritable aide et vous pouvez utiliser vos mains pour travailler de manière concentrée et hygiénique dans la cavité buccale. Une prévention efficace contre les contaminations croisées.

Mouvement droite-gauche décontracté.

Contrairement au mouvement vertical, comme sur les accélérateurs, votre pied suit un mouvement horizontal sur la commande au pied KaVo Primus 1058. Nous n'avez donc pas besoin de contracter en continu les muscles de votre jambe et pouvez travailler en toute décontraction. Vous commandez ainsi vos instruments, le fauteuil et les fonctions multimédia.

Encouragez votre équipe. Élément assistante adaptable.

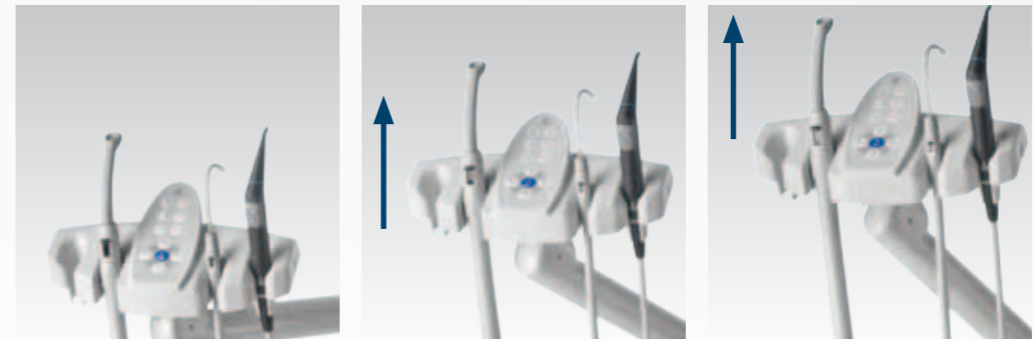


Un investissement pour le futur : le réglage en hauteur de votre élément assistante assure à votre assistante une position de travail ergonomique et respectueuse de sa santé et un processus de travail sans faille.

Conditions de travail exemplaires pour l'ensemble de votre équipe.

Dès à présent, votre assistante dispose de tous les équipements à portée de main. L'élément assistante de votre KaVo Primus 1058 bénéficie d'une accessibilité toujours parfaite grâce à sa plage de pivotement optimisée et le réglage en hauteur en option assure par ailleurs un travail ergonomique respectueux de votre santé. Vos collaborateurs disposent à tout moment d'un accès optimal au patient pour assurer ainsi des processus de travail sans faille.

Commande au pied et élément assistante – Vos atouts et avantages :

- Mains libres et muscles des jambes relâchés grâce à la pédale KaVo à commande horizontale.
- Posture de travail ergonomique et respectueuse de la santé de votre assistante, grâce à l'élément assistante pivotable et réglable en hauteur.

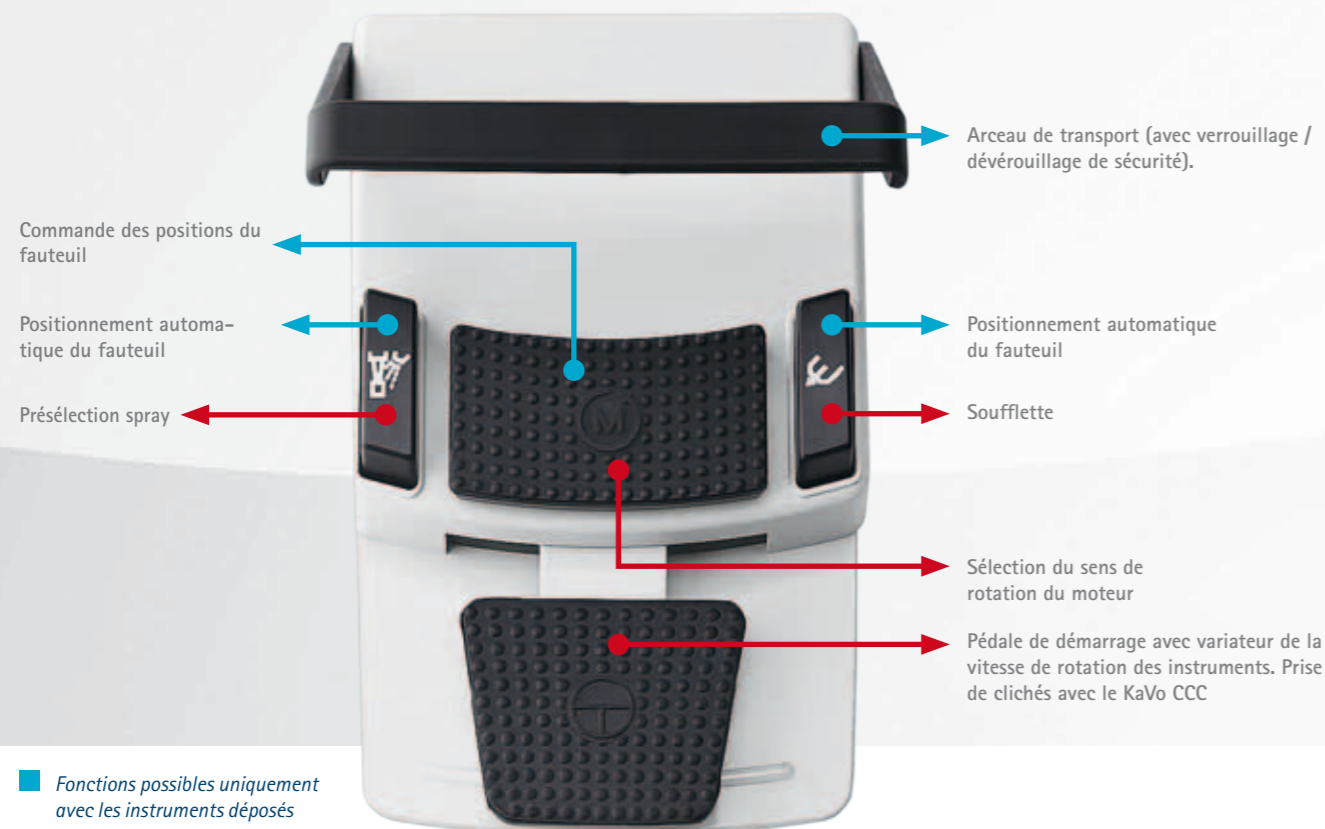

■ Fonctions possibles uniquement avec les instruments déposés

■ Fonctions possibles uniquement avec les instruments en main

Un concentré de fonctions utiles, sans futilités : l'élément assistante.



Simple, sûr et rapide. KaVo perfectionne l'hygiène.



L'hygiène d'une facilité déconcertante : la désinfection continue réduit la formation d'algues et de germes grâce à l'ajout de KaVo OXYGENAL. Les surfaces lisses, les caches de protection amovibles et les supports d'instruments facilitent le nettoyage.

Composants faciles à nettoyer.

Votre assistante réalisera aisément les opérations de nettoyage sur votre unité de soins KaVo Primus 1058. Les éléments importants, notamment le tapis en silicone et les supports d'instruments, peuvent être aisément retirés pour la désinfection. La cuvette de crachoir peut également être retirée et thermodésinfectée. Toutes les surfaces sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées rapidement et simplement. Vous profiterez quotidiennement de ce gain de temps.

HYDROclean pour éviter les pannes.

Le programme automatique HYDROclean de votre unité de soins KaVo 1058 empêche l'obstruction, notamment par le sang ou les sécrétions, et assure un nettoyage hydromécanique des récupérateurs d'amalgame, systèmes d'aspiration et de d'évacuation. Associé au gel KaVo DEKAPSOL vous pouvez miser sur un fonctionnement durable.

Pour gagner du temps avec DEKAPSEPTOL, simplement.

Le gel KaVo DEKAPSEPTOL est un mélange prêt à l'emploi et directement utilisable. Vous économisez ainsi un temps précieux. DEKAPSEPTOL recouvre les tuyaux et systèmes d'aspiration et adhère aux points critiques au lieu de s'écouler simplement.

Protection automatisée. Prévention intégrale.

Éviter les contaminations croisées.

Afin de ne pas réaspirer de l'eau contaminée dans votre KaVo Primus 1058 pendant les soins, tous les instruments et moteurs KaVo sont dotés d'un clapet anti-retour intelligent. Il assure une protection fiable de l'ensemble de l'alimentation en eau et par conséquent de votre équipe et des patients.

Programme de rinçage selon la directive RKI.

L'institut Robert Koch a déterminé les normes devant être respectées par les unités de soins pour empêcher de manière fiable les infections. Le programme de rinçage automatisé de votre unité de soins KaVo Primus 1058 - exécuté avant le début du travail et après chaque traitement - répond en tous points à ces exigences.

Le bloc d'eau répond aux exigences DVGW.

Grâce à son entrée libre d'eau, votre unité de soins KaVo Primus 1058 empêche la recontamination de la conduite d'alimentation en eau du bâtiment. Elle répond ainsi également aux exigences strictes de la DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.)

Gain de temps pour l'hygiène – vos atouts et avantages :

- Dernières normes d'hygiène (conformes RKI)
- Fonctions d'hygiène automatisées pour leur consacrer moins de temps
- Fonction HYDROclean pour éviter la coagulation protidique à l'intérieur des conduites d'aspiration
- Décontamination permanente et intensive pour réduire en continu les algues et les germes
- Composants amovibles pour améliorer et accélérer l'hygiène
- Sécurité du praticien, de l'assistante et des patients



Système de filtre : ouvrez simplement la poignée d'hygiène afin de pouvoir remplacer facilement et rapidement le filtre d'aspiration.




Éprouvé plus de 25 000 fois. La protection de votre investissement pour votre avenir.

100 % testé – 1 000 fois avéré.

Afin que votre unité de soins KaVo Primus 1058 reste opérationnelle et fiable en permanence, nous imposons les exigences les plus strictes à la fabrication et au choix des matériaux. Tous les éléments et composants sont fabriqués avec précision, parfaitement adaptés les uns aux autres et conçus pour la plus grande fiabilité et durabilité.

Pour être sûr à 100 % que nos produits satisfont à toutes vos exigences, nous réalisons des tests exhaustifs. Et ce, sur chaque unité de soins. Pour nous prémunir ainsi des pannes ou d'autres désagréments onéreux.

Et les plus de 25 000 unités de soins KaVo Primus 1058 installées dans le monde entier montrent bien que la qualité KaVo made in Germany se rentabilise pour vous aussi.

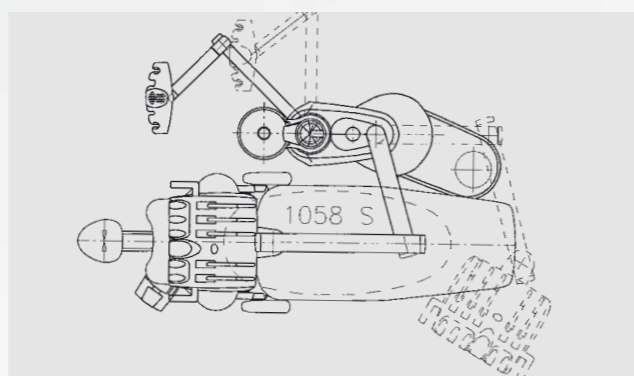

Parfaitement pensé dès le départ – plan du KaVo Primus 1058 S.



Red-dot-Award : Le design de votre unité de soins KaVo Primus 1058 tient compte et assure des processus de travail ergonomiques et efficaces. « Red dot » est un gage de grande force d'innovation, de fonctionnalité et de qualité formelle.

Perspectives attrayantes. Efficacité des coûts dans tous les domaines.

Point de raccordement flexible pour économiser du temps et de l'argent.

Afin de pouvoir installer KaVo Primus 1058 rapidement et à peu de frais, vous avons pris des mesures préalables. Elles vous permettent de réduire les mesures constructives et notamment d'utiliser un point de raccordement existant. Cet avantage déterminant est une exclusivité KaVo.

Design classique pour votre avenir.

Avec KaVo Primus 1058, misez sur un design intemporel. Dans de nombreuses années encore, ils symboliseront pour vos collaborateurs et vos patients la fiabilité et le progrès. Un classique parmi les unités de soins.

Réjouissez-vous à l'idée de la couleur et des équipements optionnels.

Avec le choix des coloris et la diversité des équipements optionnels, votre unité de soins KaVo Primus 1058 s'adapte idéalement à vos besoins.

Économie et avantages – vos atouts et avantages :

- Acquisition économique
- Fonctionnement rentable
- Sécurité élevée en cas de défaillance et longévité
- Processus rapides
- Possibilités multiples de combinaison et d'intégration
- Large gamme de produits adaptée à votre concept de soins

Coloris de peintures (standard)



BasicGrey

Coloris de peintures (en option)



Purple Red
Metallic



Silver métallique



Apple green



Orange



Dental white

Coloris des selleries



Black



anthracite



Night blue



Royal blue



Purple Red



Orange




Mint



Petit négatoscope




Négatoscope
panoramique

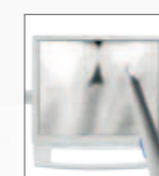

ERGOcom light +
ERGOcam



Scialytique EDI

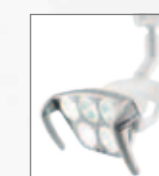

Scialytique
KaVoLUX 540 LED



Tabouret
PHYSIO 5007



Votre gamme complète. Options pour KaVo Primus® 1058.

	TM	S	Cart
Fauteuil	●	●	●
Standard	x	x	x
COMPACTchair	x	x	x
Assise réglable en hauteur	●	●	● ¹
Sellerie souple	●	●	●
Réglage du dossier	●	●	●
Comfort	x	x	x ²
Progress	x	x	x
Tête	●	●	●
2 articulations avec bouton rotatif	x	x	x
2 articulations avec bouton poussoir	x	x	x ²
Accoudoir			
Droite	●	●	● ³
Gauche	●	●	● ³
Élément praticien	●	●	●
1. Cordon turbine	●	●	●
1. Moteur LUX KL 701	x	x	x
1. Moteur LUX KL 703 LED	x	x	x
Seringue 3 fonctions	●	●	●
Seringue multifonctions	○	○	○
2. Cordon turbine	○	○	○
2. Moteur LUX KL 701	○	○	○
2. Moteur LUX KL 703 LED	○	○	○
COMFORTdrive	○	○	○
Détartreur PIEZOlux	○	○	○
Affichage Memospeed	○	○	○ ⁴
Négatoscope petit format	○	○	○ ⁴
Négatoscope panoramique (sur la colonne d'éclairage)	○	○	○ ⁵
Négatoscope panoramique (sur l'élément de table)	-	-	○ ⁴
Support tablette « US tray »	x	x	x
Support tablette 1 tray normalisé	x	-	x
Support tablette 2 trays normalisés	○	○	-
Réchauffeur de spray pour instruments	○	○	○
Sérum physiologique	○	-	-
ERGOcam	○	○	○

	TM	S	Cart
Élément assistante	●	●	●
avec élément de commande Comfort	●	●	●
Aspiration - brouillard de spray	●	●	●
Pompe à salive	●	●	●
2e aspire-salive	○	○	○
Seringue 3 fonctions	○	○	○
Seringue multifonctions	○	○	○
Lampe à polymérisation LED	○	○	○
Support de tablette	○	○	○
Support DIAGNOdent	○	○	○
Élément assistante pivotable	●	●	●
Élément assistante pivotable et réglable en hauteur	○	○	○
Guidage du tuyau d'aspiration	○	○	○
Support sélectif	○	○	○
Corps de l'unité	●	●	●
Crachoir en porcelaine	●	●	●
VACUstopp	●	●	●
Système de décontamination permanente	●	●	● ⁶
Désinfection intensive	○	○	○
HYDROclean (système de rinçage)	●	●	●
Chauffe-eau	○	○	○
Système d'alimentation	●	●	●
Bloc d'eau DVGW	x	x	x
Bloc d'eau Compact	x	x	x
Bouteille d'eau DVGW	x	x	x
Régulateur à dépression	○	○	○
Raccordement aux périphériques	○	○	○
Système d'évacuation	●	●	●
Aspiration externe	x	x	x
Récupérateur d'amalgames DÜRR	x	x	x
Séparateur automatique DÜRR	x	x	x
Récupérateur des déchets lourds	x	x	x
Divers			
Scialytique KaVoLUX 540 LED	○	○	○
Scialytique EDI	○	○	○
Colonne pour scialytique	○	○	○
Servicebox patient	○	○	○
Tablette de service 1568	-	-	-
ERGOcom light	○	○	○
Kit de base Dekaseptol	●	●	●
Pack hygiène	○	○	○



● Équipement de série ○ Options x Obligatoire - Non disponible

- 1 Non disponible avec le fauteuil patient COMPACTchair
- 2 Uniquement avec le fauteuil COMPACTchair
- 3 En option avec le fauteuil COMPACTchair
- 4 Ne convient pas au rangement sous un plateau de table.
- 5 Pas en association avec Multimédia
- 6 Uniquement avec bloc-eau DVGW et bouteille d'eau DVGW.



KaVo. Dental Excellence.